


Anillo de Tensión Capsular LR-1300B

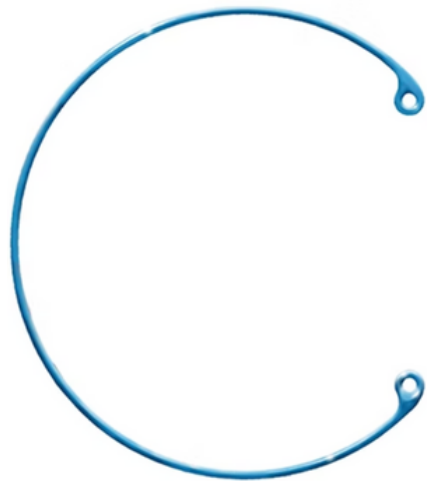

Diseñados para abordar la dificultad de implantar un anillo transparente en el fórnix del saco capsular

Es un dispositivo médico de una sola pieza diseñado para usarse en combinación con una lente intraocular para la corrección quirúrgica de la afaquia.

Está disponible en tamaños de diámetros de 10.0 y 12.0 mm y está fabricado con polimetilmetacrilato de grado médico. Su precisión garantiza flexibilidad, control de memoria y capacidad para insertarse manualmente o con un inyector de CTR reutilizable.

El principal beneficio para la salud del paciente es facilitar la estabilización y centración del saco capsular, especialmente en ojos con problemas zonulares. El anillo de tensión capsular ayuda a proporcionar un entorno operativo estable, así como a prevenir y corregir la descentralización y la inclinación de la LIO.

Las indicaciones para su uso incluyen:

- Zónulas débiles o ausentes preexistentes, por ejemplo, diálisis zonular postraumática o debilidad identificada durante la cirugía
- Síndrome de pseudoexfoliación
- Con LIO tóricas y multifocales, puede reducir el riesgo de rotación de la lente
- Alta miopía
- Para prevenir el encogimiento o contracción del saco capsular

Especificaciones

- **Referencia Producto:** LR-1300B
- **Descripción:** Anillo de tensión capsular 2 posiciones.
- **Fabricante:** Lenstec
- **Indicaciones:** Implante utilizado para la estabilización del saco, durante la cirugía de la catarata.
- **Diámetro expandido:** 12.30mm
- **Diámetro comprimido:** 10.00mm
- **Material:** PMMA Azul
- **Unidades por caja:** 1 ud.
- **Mercado CE:** CE 2797

