
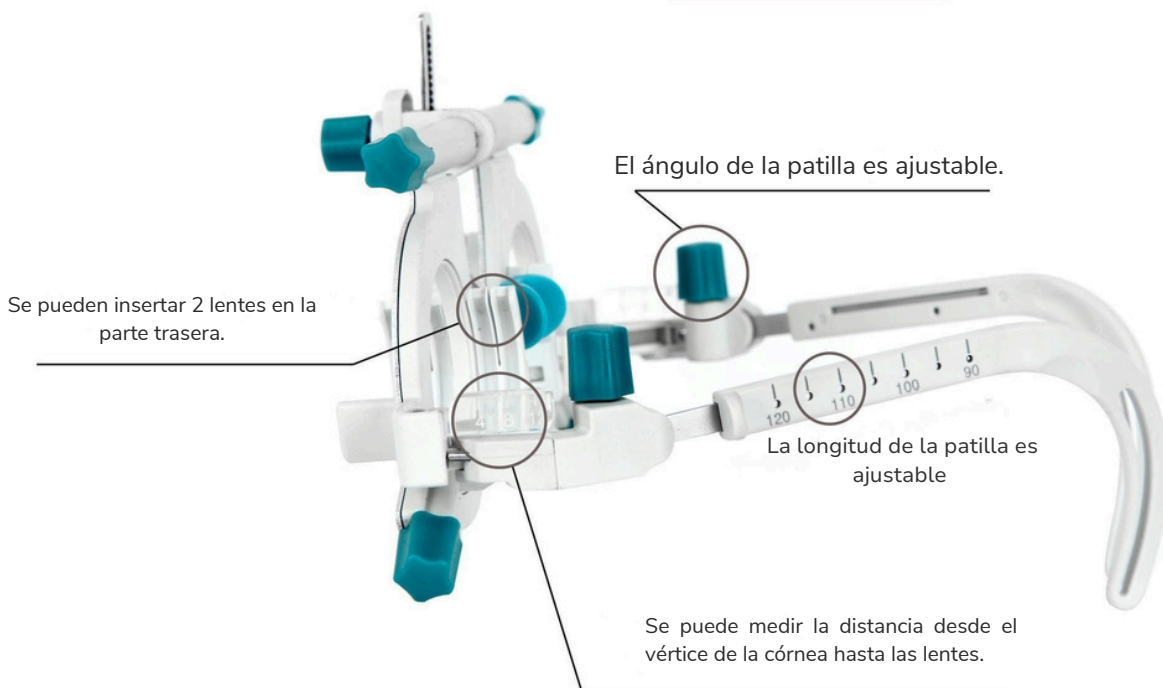


# Gafa de pruebas Ofasa CT2207G

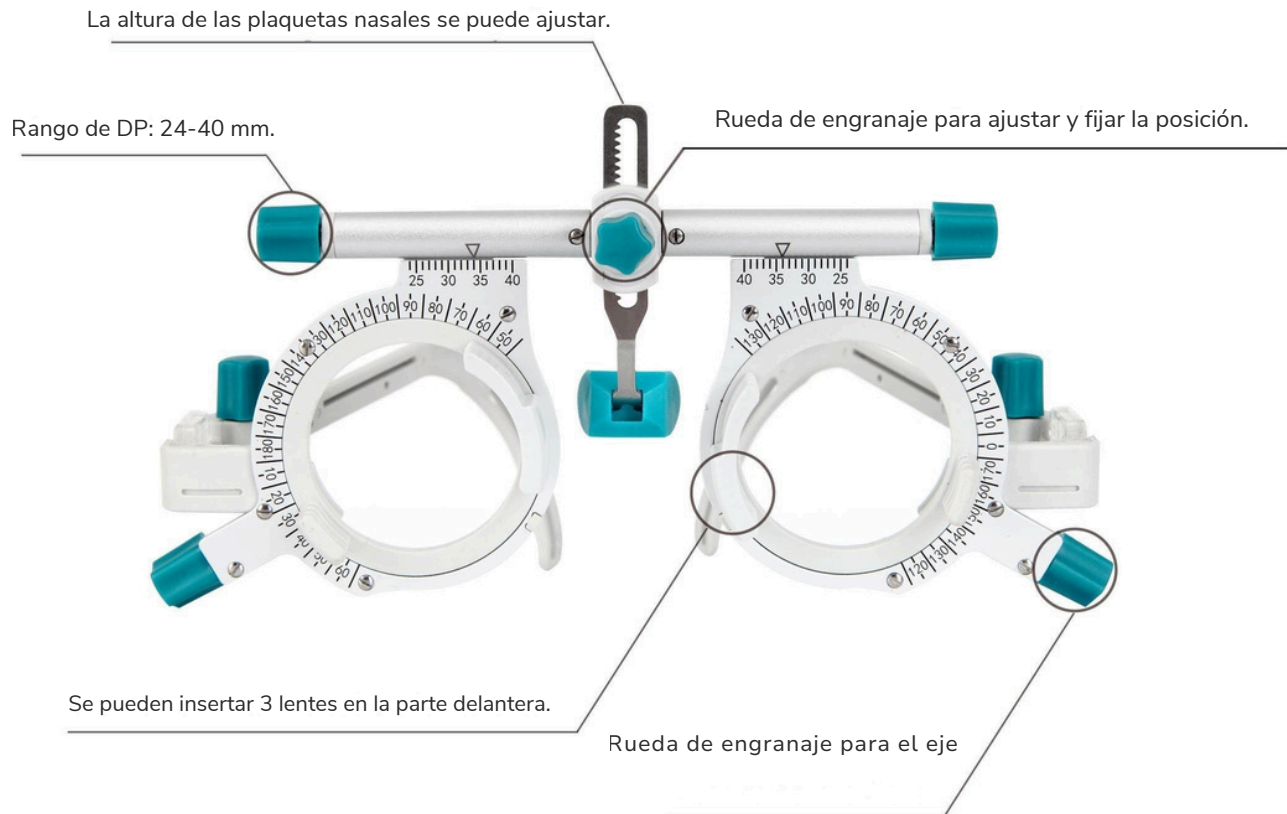

Escala de DP: 48 - 80 mm.

Peso neto: 53 gramos.

# Gafa de pruebas Ofasa CT2207G

## Características Principales

- Se pueden insertar 3 lentes en la parte frontal y 2 lentes en la parte posterior.
- Peso ligero de tan solo 53 g.
- Rango de distancia interpupilar (PD): 48-80 mm.
- Rueda de engranaje para ajustar y fijar la posición de la plaqueta nasal
- Rueda de engranaje para ajustar y fijar el eje: cuando el eje se ajusta en la posición correcta se fija presionando la rueda
- Rueda de diseño plano que facilita el ajuste del ángulo de la patilla
- La longitud de la patilla es ajustable. de 90-120mm.
- Medición adicional: Se puede medir la distancia desde el vértice de la córnea hasta las lentes.



Rueda plana para ajustar el ángulo de la patilla



Rueda para ajustar y fijar el eje



Almohadilla de silicona nasal

Clasificación: Dispositivo Médico Clase I.

Conformidad: El producto cumple con el Reglamento (UE) 2017/745 sobre dispositivos médicos.